

# G-ænial от GC

Действительно «гениальные» реставрации



Универсальный микрогибридный композитный материал нового поколения для простой и удобной работы. Позволяет создавать «невидимые» реставрации с помощью всего 1 оттенка в 95% клинических случаев за счет высокой степени слияния с окружающими твердыми тканями (эффект хамелеона).

## Показания

### G-ænial Anterior

Класс I, II, III, IV и V

Клиновидные дефекты и полости в области корня зуба

Виниры и устранение диастем

### G-ænial Posterior

Полости по I и II классу



## Ключевые аспекты

- Новая концепция оттенков – выбор оттенка эмали зависит от возраста пациента. С возрастом эмаль меняется, становится более тонкой и прозрачной. Ее светлота также меняется с высокой (более белая) на низкую (более темная). Внешние специальные оттенки помогают стоматологу создавать реставрации, по светлоте соответствующие возрасту пациента.

| G-ænial внешние оттенки       | Gradia Direct |
|-------------------------------|---------------|
| Подростковая Эмаль: JE & P-JE | WT            |
| Взрослая Эмаль: AE            | DT            |
| Пожилая Эмаль: SE             | GT            |
| Резцовая Эмаль: IE & P-IE     | NT            |
| Светопроницаемая Эмаль: TE    | CT            |
| Пришеечная эмаль: CVE         | CVT           |

- Невидимость реставраций


Больше, чем просто «соответствие», полное слияние с окружающими твердыми тканями зуба.

Фото: Dr Javier Tapia, Spain



- Принципиальная разница между оттенками Anterior и Posterior: Anterior - более пластичный, легко оформлять контуры с помощью кисти, Posterior более плотный, легко вносить в полость и паковать. В состав входят разнообразные наполнители, поэтому G-ænial обладает высокой способностью к рассеиванию светового потока, что позволяет материалу идеально имитировать отражательную способность естественных тканей зуба. Увеличенное содержание наполнителей (81% от массы) обеспечивает исключительную прочность и отличные отдаленные результаты.

Gradia Direct

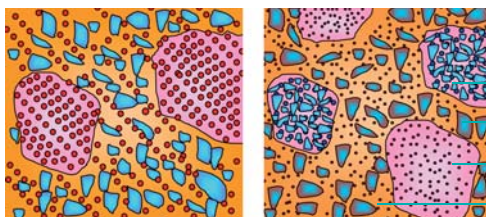

G-ænial:

Улучшенный предварительно полимеризованный наполнитель


Фтор-алюмосиликатное стекло

Предварительно полимеризованный наполнитель

Нано кремний

- Рентгеноконтрастность всех оттенков Anterior и Posterior

| GC G-ænial Anterior | GC G-ænial Posterior | GC Gradia Direct X | GC Gradia Direct Anterior | GC Gradia Direct Posterior |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| 140%                | 250%                 | 214%               | 51%                       | 131%                       |

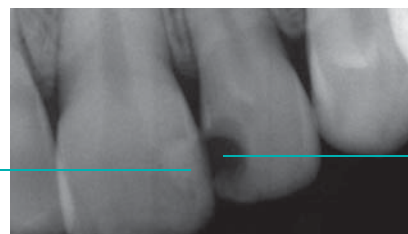

реставрация  
GC G-ænial

реставрация  
GC Gradia Direct